




**detrox**<sup>®</sup>

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ГИГИЕНЫ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

# detro<sup>®</sup> Wash

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ  
ЭНДОСКОПОВ

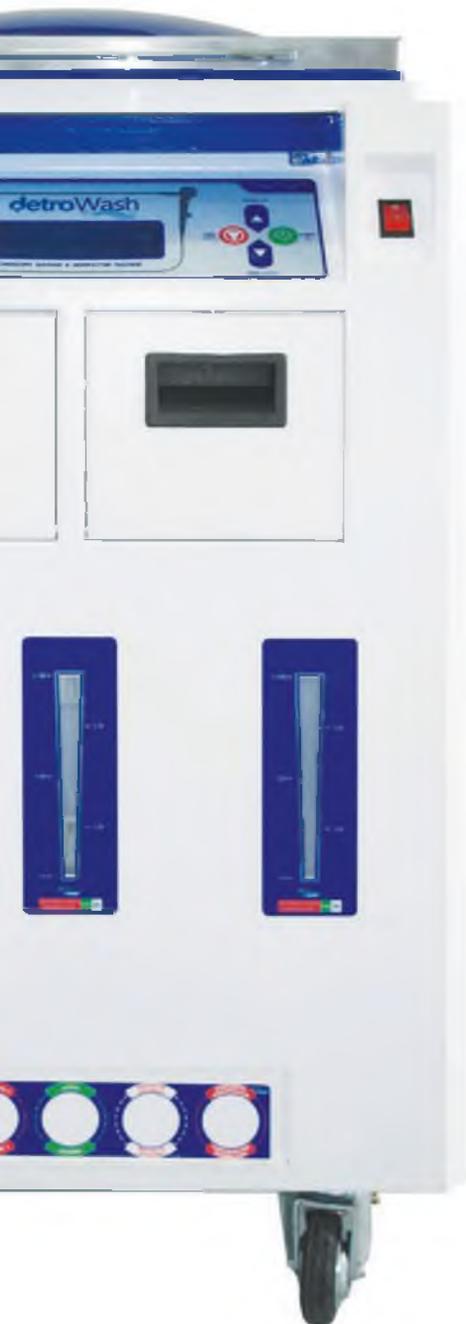

## Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash

«Detro Wash» обладает рядом уникальных функций, предназначенных для обеспечения унифицированной, надежной, качественной обработки гибких эндоскопов

### ОСОБЕННОСТИ:

- Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и стерилизацию гибких эндоскопов
- Обрабатывает одновременно 1 или 2 гибких эндоскопа
- Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа
- Возможность подогрева дезинфектанта
- Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
- Наличие автоматического контроля критических параметров цикла обработки эндоскопов с выдачей протокола
- Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и гастроскопы), за счет двух баков для многоазовых дезинфицирующих средств
- Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, качественная очистка всех каналов
- Возможность подключения гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, Karl Storz, Aohua, SonoScop и др.
- Возможность документирования процесса (принтер)
- Тест на герметичность
- Возможность выбора оптимального алгоритма обработки эндоскопов
- Наличие режима самодезинфекции машины
- Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение многоазовых готовых растворов

«Detro Wash» позволяет значительно уменьшить контакт персонала отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвратить их негативное воздействие на здоровье.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Емкость баков</b>	
Вода, не менее,	15 л
Детергент, не менее,	5 л
Дезинфектант 1 бак, не менее,	15 л
Дезинфектант 2 бак, не менее,	15 л
Концентрированный дезинфектант, не менее,	5 л
Водный раствор спирта, не менее,	5 л

### Диапазоны дозирования

Дезинфектанта	от 0 до 250 мл
Детергента	от 0 до 250 мл
Сушка спиртом	от 0 до 250 мл

### Диапазон установки значений таймера

Промывка водой:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Детергент:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Дезинфектант:	от «00:00:00» до «59:59:59»
Сушка воздухом:	от «00:00:00» до «59:59:59»

### Разъемы подключения в кювете

Для двух эндоскопов	6 подключений
Для одного эндоскопа	4 подключения

### Слив

Принудительный слив, для канализации	1 подключение
Принудительный слив, для растворов	5 подключений

### Габариты

Габаритные размеры, не более	600×900×1080 мм
Модуль подвода воды, не более	130×750×500 мм

Система подогрева дезинфектанта от 20°C до 60°C

Тип электропитания: однофазное 220 ± 10% (50/60 Гц) В, с заземлением

Максимальная номинальная мощность 1800 Вт

detrox<sup>®</sup>



detrox<sup>®</sup>

